


Руководство по сборке и эксплуатации



Ленточное массажное устройство

Topfit

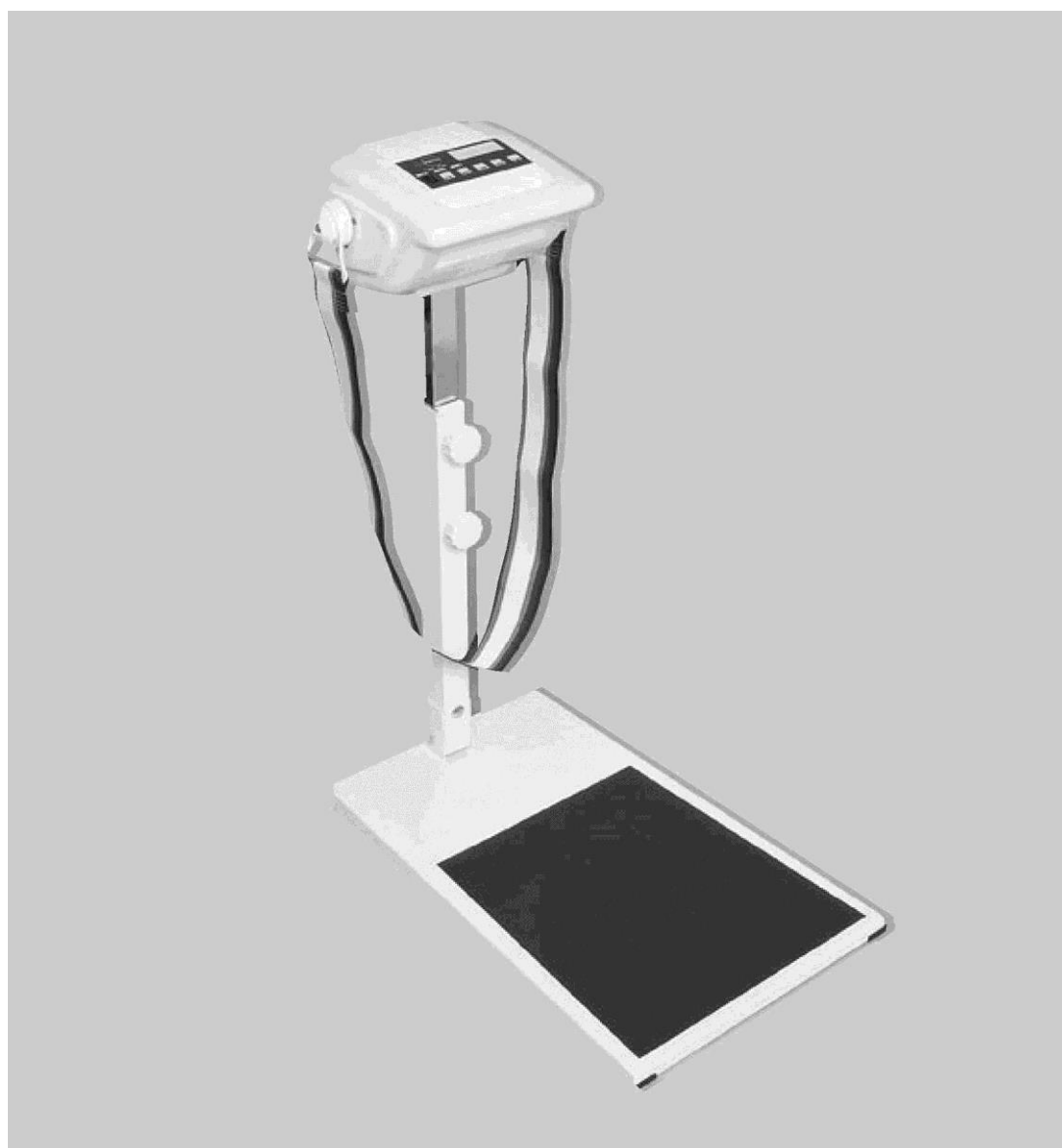

№ 29551497 / 19.02

20010348



Дорогой покупатель,
большое спасибо за покупку массажного устройства доктора Керна.

Для того чтобы сделать обращение с этим устройством простым и понятным для Вас, мы приложили настоящее руководство. Оно должна помочь Вам быстро ознакомиться со своим новым прибором. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед вводом устройства в эксплуатацию. Если у Вас возникли вопросы или проблемы с устройством, обращайтесь в наш сервисный отдел.

DR. KERN OOO
Москва, пр-т Вернадского 78 стр.9
Тел.: (495)5648772
Факс: (495)5648773
Интернет: www.dr-kern.ru

Важные указания

- Сначала проверьте комплектность своей поставки.
- Внимательно прочитайте данное руководство по сборке и эксплуатации.
- В случае болезни, беременности и нарушениях перед началом применения устройства непременно проконсультируйтесь со своим врачом.
- Проверьте, совпадает ли подключение к электрической сети с указанным на маркировке напряжением.
- Никогда не проводите массаж с применением специальных поясов на неприкрытой коже.
- Включайте устройство только при слабой нагрузке.
- Внимание! Дети не осознают опасности, которые могут возникнуть при обращении с электроприборами. Поэтому никогда не позволяйте детям работать с устройством без надзора взрослых.

Технические характеристики

Электропитание: 230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность: 280/380 Вт

Сборка устройств без амортизаторной системы

1. Сначала выньте из упаковки опорную плиту (L) с трубой штатива (F). Теперь установите трубу штатива в вертикальное положение, при этом вставляйте трубу штатива в опору таким образом, чтобы все три отверстия для винтов не совпали (рис. 1). Зафиксируйте трубу при помощи входящих в комплект поставки винтов (H) и стопорных колец (K).
2. Выньте массажную головку (A) со встроенной направляющей трубой (D) из упаковки 1.
3. Наденьте массажную голову с раструбом на штатив.
4. Установите при помощи винтов с вращающейся ручкой (E) желаемую высоту.
5. Навесьте массажный пояс (C) на предусмотренные для этого канавки в креплениях для пояса (B).
6. Присоедините сетевой кабель к штепсельной розетке, и массажное устройство готово к эксплуатации.


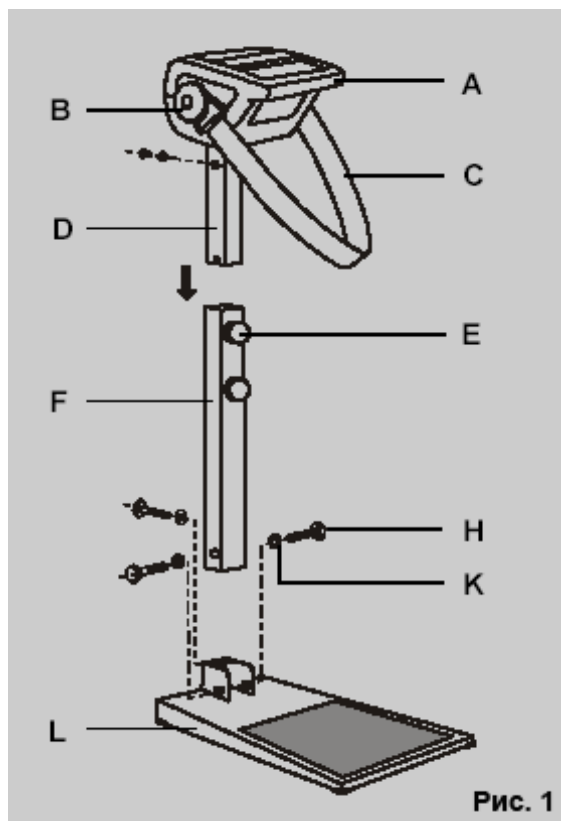


Рис. 1

Ввод в эксплуатацию

Topfit

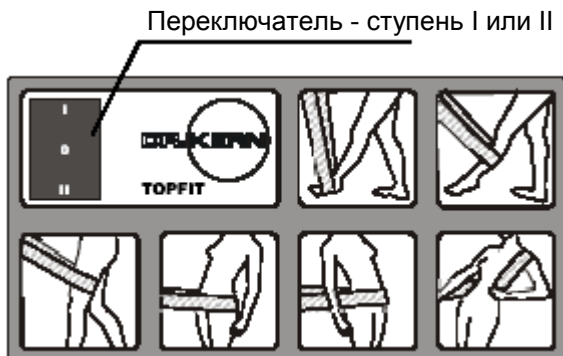

Посредством приведения в действие переключателя Вы можете включить устройство. Выберите ступень I или II.

Ступень I = 900 оборот. в мин.
Ступень II = 1400 оборот. в мин.

Чистка устройства

Перед проведением любой чистки обязательно вытаскивайте из розетки сетевую вилку. Затем Вы можете проводить чистку устройства с помощью увлажненного куска ткани. Не используйте никаких едких чистящих средств, таких как разбавители или прочие растворители.

Правила техники безопасности

Никогда не проводите массаж с применением специального пояса на непокрытой коже. Таким образом можно нанести себе повреждение кожи. В качестве одежды лучше всего используйте плотно облегающую одежду, например, трико, колготки, боди.

Ленточные массажные устройства для массажа всего тела

Массаж применяется при растяжении и уплотнении мышц. Кроме того, ленточный массаж улучшает кровоснабжение, циркуляцию, а также обмен веществ, укрепляет соединительную ткань и нервную систему. Посредством скользящего ленточного массажа достигается гимнастический эффект. Посредством скручивания, поворота и изгиба тела можно использовать скольжение специальной ленты от стоп через ноги и бедро вплоть до плеч. Таким образом реализуются гимнастические упражнения при помощи ленточного массажного устройства. Для улучшения общего состояния здоровья рекомендуется проводить массаж всего тела в течение примерно 5-10 минут. Ленточный массаж подходит всем, однако, при некоторых заболеваниях необходимо непременно проконсультироваться с врачом до начала массажа. Проведение массажа недопустимо при лихорадочных заболеваниях, расширениях вен, тромбозах, флебите, беременности, желтухе, злокачественных опухолях или острых воспалениях. Дополнительно доступен шариковый пояс для улучшения массажного эффекта, а также щеточный пояс для интенсивного кровоснабжения кожи. Чистку поясов можно легко проводить в мыльном растворе.

Принадлежности для ленточного массажного устройства

Щеточный пояс быстро улучшает кровоснабжение



Шариковый пояс оказывает глубокое воздействие



Применение

Далее представлены примеры применения массажного устройства.

Регулярное применение содействует хорошему самочувствию. Тем не менее, в любом случае, обратите внимание на ограничительные указания, а также на длительность проведения массажа, указанную в предшествовавших главах.

Массаж ступней, ног





Начните полный массаж тела, свободно расположив правую ногу в массажном поясе. После того же самое повторите с левой стопой. Затем продолжите массаж ног. Массаж бедра способствует кровоснабжению и расслабляет мышцы.

Расположите пояс вокруг бедра и отставляйтесь в этом положение по мере возможности.

Посредством медленного скольжения пояса вверх и вниз Вы достигаете желаемого эффекта.

Массаж икр

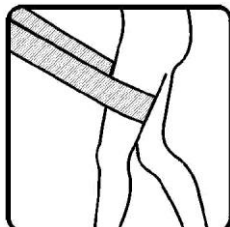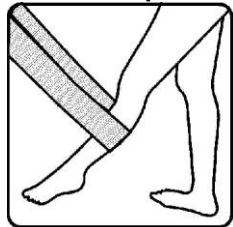

Вы можете проводить массаж икр в положении стоя или сидя. Вложите правую или левую икру в пояс и полностью расслабьте ногу. Такое применение устройства, как и при массаже стоп, способствует улучшению кровообращения и снимает судороги мускулатуры икр.

Важно!

При заболевании ног мы рекомендуем сначала непременно проконсультироваться с врачом.





Массаж бедер

С помощью специального массажного пояса Вы можете массировать особенно комфортно талию, бедра и ягодицы.


Такой массаж содействует кровоснабжению и выведению шлаков. При тучных бедрах и талии мы рекомендуем проводить ежедневный ленточный массаж.

Массаж мышц живота

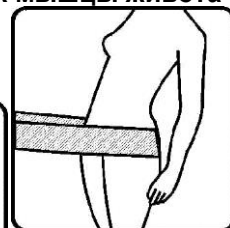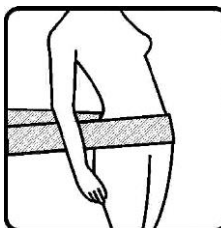

Данный массаж вызывает укрепление слабой брюшной мускулатуры. Превосходное глубокое воздействие вибраций оказывает особое положительное влияние на явность кишечника. Поместите пояс перед брюшной мускулатурой, склонитесь немного вперед и расслабьте мышцы верхней части туловища.

Массаж спины и плеч

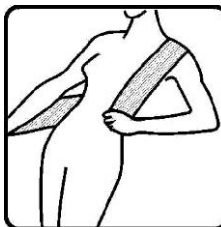

Массаж спины и плеч от растяжения и уплотненной мускулатуры. Широко распространенные болезни нашей цивилизации - это растяжения и судороги (после длительного периода вождения автомобиля, работы за письменным столом). Длительные дефекты осанки можно купировать с помощью ленточного массажа.

Выньте пояс с одной стороны из крепления, положите через плечо и держите свободный конец рукой.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства принимаются согласно действующим законным правилам и нормам.

Гарантия изготовителя

- Гарантийное время начинается с даты, указанной в документе, подтверждающем покупку, и длится 12 месяцев.
 - Гарантийные услуги предоставляются только, если может быть представлен относящийся к устройству документ, подтверждающий покупку.
 - В гарантию не включаются: трубки, форсунка, стартер, а также акриловая газовая шайба.
 - При внесении изменений в устройство, которые производились без определённого согласия производителя, право на гарантийный ремонт теряется.
 - Для дефектов, которые возникли вследствие ремонта или вмешательства не уполномоченных на проведение этих операций лиц или вследствие ненадлежащего использования, право на гарантийный ремонт теряется.
 - В гарантийных требованиях нужно указывать серийный номер, а также номер изделия вместе с наименованием устройства и исчерпывающим описанием неисправности.
 - Данная гарантия охватывает возмещение испорченных частей устройства за исключением нормального износа.
- При рекламациях устройство необходимо присылать в оригинальной упаковке или в соответствующей предназначенной для этого упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность возникновения повреждений при транспортировке) в наш сервисный отдел. Всегда присылайте устройство с заполненной гарантией. Возможные возникающие расходы на перевозку при отправке и обратной отправке оспариваемых устройств не могут быть возложены на нас. В случае реализации гарантийных требований за пределами Германии обращайтесь, пожалуйста, к своему специализированному дилеру по данному профилю продукции. В этом случае непосредственная реализация гарантийных обязательств в нашем сервисном центре невозможна.

Дата ввода в эксплуатацию:

Печать и подпись продавца: